



# comprimed<sup>®</sup>

GRADIENT

6

Compresión gradual e intermitente  
para el tratamiento específico del edema venoso

## Sistema de 6 niveles

- Tratamiento de compresión
- Sistema de compresión controlada

*passion for compression*

[www.comprimed.de](http://www.comprimed.de)





## El sistema gradual

Los dispositivos de compresión intermitente se emplean de forma constante en las terapias descongativas para el tratamiento y la prevención de enfermedades edematosas, tanto en el uso clínico y ambulatorio como doméstico. La efectividad de este tratamiento se ha probado en diversas ocasiones y ha quedado plasmada en numerosos estudios con impresionantes resultados.

Gracias a su acción suave y sus resultados casi inmediatos, este sistema, basado en la compresión gradual, se ha convertido en uno de los dispositivos predilectos en terapia descongativa.

El sistema de 6 niveles de **comprimed**<sup>®</sup> GRADIENT se especializa en el tratamiento de edemas varicosos y linfáticos leves, y gracias a su método de compresión gradual da unos resultados casi inmediatos.


Esa presión de tratamiento gradiente consigue una caída de la presión fisiológicamente eficaz. Así el líquido, que es movilizado por la presión generada en las cámaras, puede retornar sin obstáculos ni reflujo.

El concepto de compresión gradual intermitente es el resultado de una gran investigación médica, y surgió a partir de la idea de fabricación de las medias de compresión y medias para la trombosis.

## Funcionamiento

En un ciclo de compresión, las seis niveles del manguito se inflan sucesivamente comenzando por la zona distal.

Todas las cámaras permanecen infladas hasta que la última ha obtenido la presión deseada, entonces se vacían simultáneamente y, tras una pausa, el ciclo de compresión comienza de nuevo.

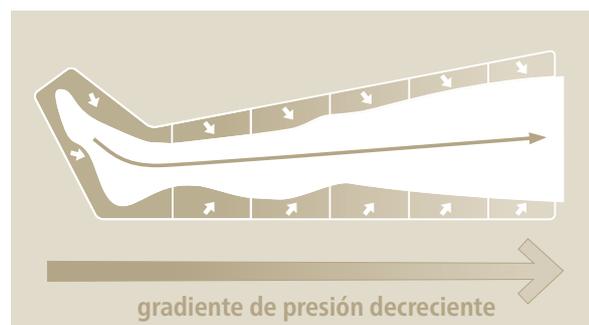

La presión gradual genera un efecto de descongación suave y sutil que repercute en cada una de las capas de tejido y los vasos sanguíneos; así, se descongaciona el tejido, se favorece la circulación y, se mejora el metabolismo e intercambio de gases de forma duradera.

Los contundentes resultados de esta terapia con **comprimed**<sup>®</sup> GRADIENT, y la gran aceptación por parte de pacientes y terapeutas distinguen este dispositivo terapéutico.

## Los manguitos

Disponibles para brazos y piernas, son modernos, manejables y están confeccionados con un tejido especialmente agradable para la piel y fácil de lavar; además, es fácil de colocar gracias a su cremallera y su cierre de velcro, que permite una adaptación perfecta en la zona del muslo. Están sujetos a las normas DIN, EN e ISO y, por lo tanto, han pasado las rigurosas pruebas biológicas correspondientes.



**Manguito para la pierna** con 6 cámaras de aire, cremallera y cierre de velcro.

Talla M: circunferencia del muslo 70cm, largo 85cm.

Talla L: circunferencia del muslo 83cm, largo 85cm.



**Manguito para el brazo** con 6 cámaras de aire y cremallera.

Circunferencia del brazo 60cm, largo 67cm.

## Terapia de apoyo en casa

En algunos casos es necesaria y beneficiosa: en casos de enfermedades crónicas puede suponer un refuerzo significativo continuar la terapia en casa, siempre bajo prescripción médica. Además, permite reducir el número de sesiones de fisioterapia y prescindir de los períodos de descanso. De este modo, el paciente está perfectamente equipado y puede determinar por sí mismo cuándo comenzar su tratamiento diario, o reaccionar de manera espontánea en caso de tener molestias graves. La terapia en casa está justificada en casos de enfermedad crónica, intolerancia a algunos medicamentos (p.ej. diuréticos) o incompatibilidad con la compresión constante.

### Indicaciones

- Profilaxis del tromboembolismo
- Síndrome posttrombótico
- Ulcus cruris
- Edema venoso
- Edemas postraumáticos
- Linfedema
- Lipoedema
- Mezclas de edema
- Enfermedad arterial oclusiva periférica bajo estricto control
- Trastorno sensorial en la hemiplejía

### Contraindicaciones

- Insuficiencia cardíaca descompensada
- Tromboflebitis extensa, Trombosis o sospecha de trombosis
- Erisipela
- Hipertensión grave e incontrolada
- Traumatismos agudos de los tejidos blandos de las extremidades
- Neuropatía
- Procesos oclusivos en la zona de drenaje linfático
- Síndrome compartimental
- Flemón agudo

2 años de garantía.

El dispositivo y los manguitos no requieren mantenimiento.



### comprimed® 100 GRADIENT



- Conexión para 2 manguitos.
- Compresión gradual de 6 niveles.
- Ajustes de presión de 20 a 80 mmHg.
- Pausa en intervalos de 15 seg.
- Reloj integrado y desconexión automática.
- Dimensiones: 23cm de ancho, 15cm de alto, 21cm de largo.
- Peso: 3,2kg.